

保証書

本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

品名	Thaleia pitôn
品番	TLA-PH01IV
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL ()
販売店	店名・住所・TEL

※レシート等、購入製品・購入日が記載された資料と共に大切に保管してください。

お問い合わせ先

■お電話でのお問い合わせ

カスタマーサポート(株式会社ベネレ内)



03-5797-8730

平日 10:00~17:00 (土日祝・年末年始・指定休業日を除く)

■メールでのお問い合わせ

DMM.make PRODUCTSサポート窓口



makesupport@mail.dmm.com

平日 10:00~18:00 (土日祝・年末年始・指定休業日を除く)

販売元

合同会社DMM.com

〒106-6224 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー24F
<https://distribution.dmm.com/>

保管用

保証書付き


Thaleia pitôn

家庭用デリケートゾーン美容機器

Theleia pitôn

取扱説明書

1.安全上のご注意	P1
2.各部の名称	P5
3.ご使用前の	P6
4.充電方法	P8
5.お肌へのプレテスト	P9
6.使い方	P9
7.使い終わったら	P11
8.よくある質問(Q&A) トラブルシューティング	P12
9.製品仕様	P13
10.保証・アフターサービス	P13

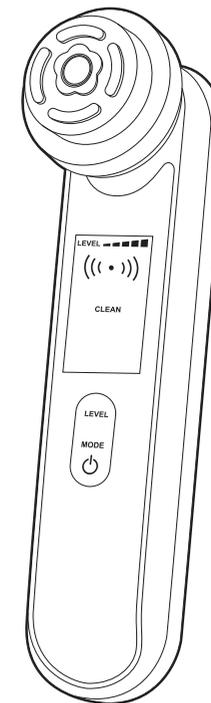

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

1. 安全上のご注意

必ずお守りください

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

【注意区分について】

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。 ※物的損害とは、家屋 家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

【図記号について】

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

 禁止	次に該当する人は使用しない。 医用電子機器の誤動作を招く原因となります。 ◆医用電子機器を使用している人 ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器 ・人工心肺など生命維持用医用電子機器 ・心電計などの装着型医用電子機器
---	---

警告

 禁止	次のような人は使用しない。 事故やトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・急性疾患 ・結核性疾患 ・発熱している人 ・高血圧 ・伝染病疾患 ・悪性腫瘍 ・血液疾患 ・内臓疾患 ・皮膚病 ・アレルギー体質 ・重度のアトピー性皮膚炎 ・皮膚トラブルがある人 	<ul style="list-style-type: none"> ・敏感肌またはお肌の弱い人 ・体調がすぐれない人 ・酒気帯びの人 ・強度近視の人 (-6D以上) ・目や顔の手術を受けた人 ・目や顔に疾患がある人および治療中の人 ・妊娠中、生理中、授乳中 ・眠気をさそう薬を服用中の人 ・物理的刺激などによる病的なシミのある人 ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人
	指定の部位以外や次のような部位には使用しない。 事故やトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・デリケートゾーンの粘膜部分には使用しない ・切り傷 ・手術(整形手術を含む)をした部位 ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ・カユミやほてりのある部位 	<ul style="list-style-type: none"> ・にきび ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・眼球 ・まぶた、目のまわり ・のどぼとけ ・口内、口周り
ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。		

 禁止	火中投入・加熱・高温での使用・放置をしない。 発熱・発火・破裂の原因となります。	 禁止 使用者の制限	子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。 事故やケガをする原因となります。
---	---	---	--

 禁止 用途以外禁止	取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 ケガをしたり、本機が故障する原因となります。	 禁止 異臭・異常発熱時 使用禁止	異臭・異常発熱したときは使用を中止する。 破損・発火の原因となります。
---	---	---	--

 禁止	引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。 火災・感電・ケガの原因となります。	 禁止 使用者の制限	自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。 事故やケガをする原因となります。
---	---	---	---


警告

 タコ足配線 禁止	本製品には必ず専用のUSBケーブルを使用する。 またUSBケーブルは、タコ足配線にしない。 感電・ショート・発火の原因となります。	 水かけ 禁止	浴室、水場ではUSBケーブルを使用しない。本体やUSBケーブルを水につけたり、水洗いしない。 感電・ショート・発火の原因となります。
 無理な扱い 禁止	USBケーブルを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。 また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。	 傷んだ コードプラグ 使用禁止	USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。 修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
 必ず守る	USBプラグやプラグ差込み口に水が付着していないことを確認してから充電する。 感電・ショート・発火の原因となります。	 分解禁止	分解や修理・改造はしない。火災・感電・ケガの原因となります。 修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
 必ず守る	USBケーブルは根元まで確実に差し込む。 火災・感電事故の原因となります。	 USBケーブル を抜く	使用しないときはUSBケーブルを電源から抜く。 また、濡れた手で抜き差しはしない。 感電・ショート・発火の原因となります。
 USBケーブル を抜く	本体や電源からUSBケーブルを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。 感電・ショート・発火の原因となります。	 発火注意	火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。 また、熱器具に近づけない。 発熱・発火・破裂の原因となります。
 USBケーブル を抜く	万一、異常が発生したら、USBケーブルをすぐに抜く。 けむり異音においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。	 必ず守る	使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。 感電・ショート・発火の原因となります。


注意

 禁止	不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶつけたりしない。 本体の故障原因となります。また、足の上などに落とすとケガの原因となります。
 禁止	本体をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。 本体の表面に損傷を与える原因となります。
 禁止	電極ヘッドを金属にあてない。 故障・ケガの原因となります。
 禁止	LEDの光を直接のぞき込まない。 目を痛める原因となります。
 禁止	ベットには使用しない。 ケガの原因となります。
 禁止	COOLモードを連続して使用しない。 連続使用すると、冷え方が弱く感じられるようになります。 再度使用する時は30分以上間をあけてから使用してください。
 必ず守る	以下の項目は必ず守る。 事故やケガ、本体が故障する原因となります。 ・同じ箇所にあて続けない。 ・お肌の状態にあわせて使用する。 ・使用部位の状態にあわせて使用する。 ・使用後は必ず電源をオフにする。
 必ず守る	使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。 お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
 必ず守る	初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。 事故やケガをする原因となります。


2. 各部の名称

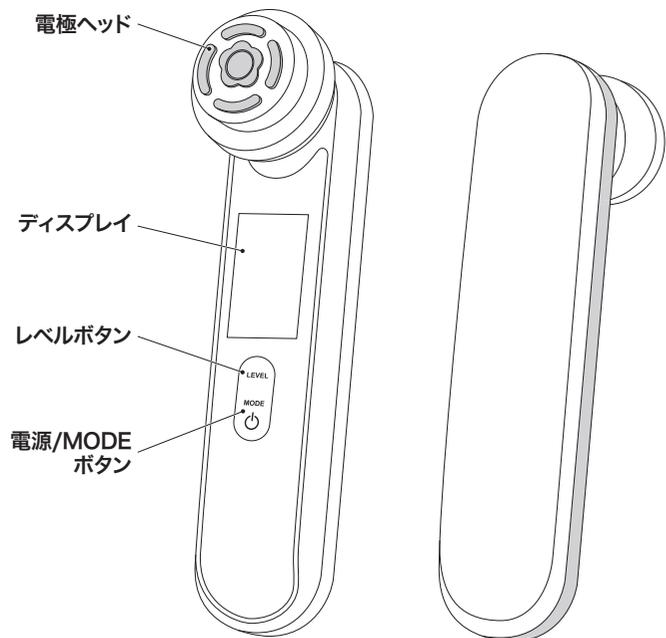

●付属品

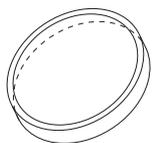

コットンリング

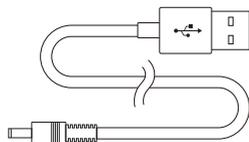

充電用USBケーブル




取扱説明書


※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

3. ご使用の前に

- 1 電源/MODEボタンを約2秒長押しして電源をオンにします。
(自動的にCLEANモードがスタートします)
- 2 各モード動作時に、電源/MODEボタンを単押しすると、モードが切り替わります。
- 3 各モード動作時に、レベルボタンを単押しすると、レベルを選択することができます。レベルは5段階です。
※COOLモードはレベルを選択することができません。
- 4 各モード動作時に、電源/MODEボタンを約2秒長押しすると、電源がオフになります。

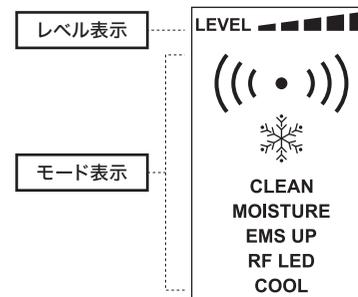


各モード動作時に、レベルボタンを約2秒長押しすると、
パイブレーションをオフにできます。

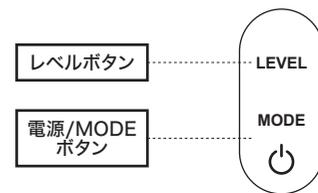

モード表示

電源/MODEボタンを押すと
CLEAN→MOISTURE→EMS UP→RF LED→COOLの順にモードが切り替わります。

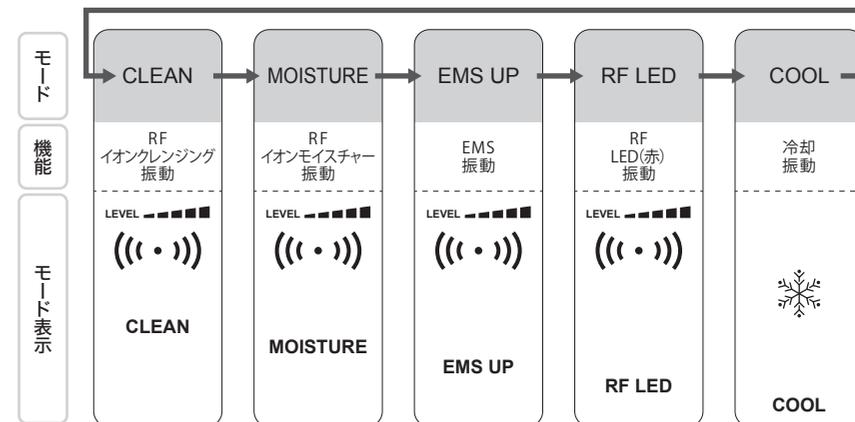


●各モードについて

モード	特徴	機能	推奨	時間	レベル	使用頻度 (目安)
CLEAN	お肌を温めながら、通常は落としかねない汚れを吸着しスッカリとしたお肌に整えます。	・RF ・LED(青) ・イオンクレンジング ・振動	コットン+水	約3分	イオン 5段階	週に 2~3回
MOISTURE	お肌を温めながら、お肌のすみずみまで美容成分を浸透させ、うるおいのあるお肌に導きます。	・RF ・LED(赤) ・イオンモイスター ・振動	専用セラム	約3分	イオン 5段階	
EMS UP	EMSによって筋肉を刺激し、トレーニング効果によって筋肉を引き締めます。	・EMS ・LED(赤) ・振動	専用セラム	約3分	EMS 5段階	
RF LED	お肌を温めながら、お肌に光を当ててケアします。	・RF ・LED(赤) ・振動	専用セラム	約3分	RF 5段階	
COOL	ヘッドが急速に冷却します。お肌を冷却することで、お肌を引き締めて、うるおいを閉じ込め、お肌を鎮静します。	・冷却 ・LED(青) ・振動	そのままお肌に あててください	約3分	無し	毎日 でも可

※必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けしないでください。 ※角質層まで
 ※COOLモード使用後は本体や電極ヘッドが熱くなります。連続で使用しないでください。
 使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。

レベル表示

LEVELボタンを押すと、各モードのレベルを選択することができます。
 レベルは5段階あります。心地よいと感じるレベルを選択してください。

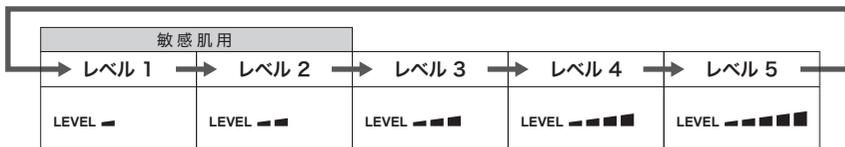

※CLEANモード/MOISTUREモードではイオンの強弱を選択できます。

※EMS UPモードではEMSの強弱を選択できます。


※RF LEDモードではRFの強弱を選択できます。

※COOLモードでレベル選択はできません。

※初めて使用する場合や使用方法に慣れるまではレベル1でご使用ください。

充電表示

充電中は充電表示が点滅します。
 充電が完了すると充電表示が点灯します。
 ※使用中は点灯しません。

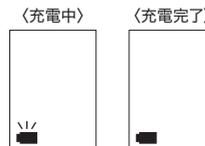

スタンバイ表示・オートオフ(自動電源オフ)

CLEANモード・MOISTUREモード・EMS UPモード・RF LEDモードが終了すると約2分間、次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態となります(動いていない状態です)。

MODEボタンを押すと点滅表示しているモードがスタートします。

約2分間操作をしないと「ビッピッ」と音がなり、自動で電源が切れます(オートオフ)。COOLモードの終了時のみ、スタンバイにはならず自動で電源が切れます(オートオフ)。


振動機能

レベルボタンを約3秒以上長押しすると、振動機能のオン・オフを選択することができます。

4. 充電方法

- 本製品は、充電式のため、コードレスで使用することができます。
 付属のUSBケーブルを本体に接続して、充電してください。
 ※充電をしながらのご使用はできません。
- 使い始め(購入直後や長時間使用しなかった場合は)必ず充電し、
 充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。
 ※動作時間(右図)は充電環境 室温約25°Cにおいて満充電直後からの時間です。
 ※動作時間は使用モード・使用レベル・使用環境によって変わります。
 ※電池の残量、使用環境によって、充電時間は前後します。

充電の目安	
充電時間	動作時間
約3時間	約40分

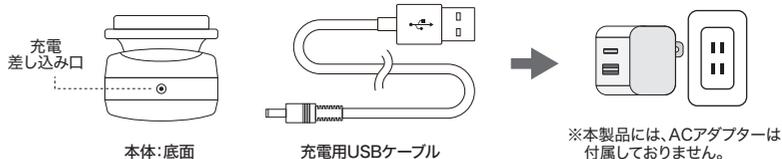

●充電の手順

- ・本体の充電差し込み口に、アダプタープラグを差し込む
- ・ACアダプターをコンセントに差し込む
 - 5V/1AのACアダプターを使用して、約180分の充電時間です。
 - ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。
 - 充電を開始すると、充電表示が点滅します。充電が完了すると、充電表示が点灯します。

5. お肌へのプレテスト

※製品を使用する際は、必ず専用セラムを使用してください。

- 1 お肌を清潔な状態にします。
・腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどでふきとります。
- 2 腕の内側に専用セラムを塗り、MOISTUREモードで約3分間製品を使用します。
・プレテストをした部分は水でぬらしたりこすったりしないでください。

24時間以内にお肌に異常(赤みやほてり)を感じなければ使用できます。



注意

- ・肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- ・実施部位に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流してください。
- ・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。


6. 使い方

- 1 使用箇所を清潔にする。
●油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。
- 2 CLEANモードを選択する場合は、精製水(水道水も可)をコットンに軽く含ませ、コットンリングで本体に装着する
- 3 電源/MODEボタンを長押し(約2秒)して電源をオンにする。
モード、レベルを選択する。
●電源/MODEボタンでモードを選択してください。
●LEVELボタンでレベルを選択してください。
※COOLモードでレベルは選択できません。
※初めて使用する場合や使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
- 4 電極ヘッドをお肌にあてて動かす。
●各モードが終了すると約2分間スタンバイ状態(COOLモード終了時は電源オフ)になります。
電源/MODEボタンを押して次のモードをスタートさせるか、電源/MODEボタンを長押し(約2秒)して電源をオフにします。
※使用中は必ず、電極ヘッドをしっかりお肌にあててください。
※MOISTURE/EMS UP/RF LEDモードは、専用のセラムをお肌に塗布して、使用してください。
※CLEANモード以外は、コットンを外してご使用ください。
- 5 電源/MODEボタンを長押し(約2秒)して電源をオフにする。
※COOLモード終了時は、自動で電源が切れます。
- 6 ケア終了後お肌を整える。
●保湿クリームやオイルなどを塗布してください。

- 7 電極ヘッドやコットンリングに付いた、汚れや液体を拭き取る。

コットンの付け方

- 1 本体からコットンリングを外す。

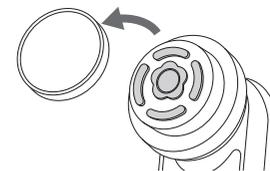

- 2 電極ヘッド部分にコットンを1枚のせ、コットンリングを押し込むように付ける。
※コットンリングでコットンがとまりづらいい場合は、薄手のコットンを使用してください。

お肌へのあてかた

RFのケア方法

本体を動かすスピードの目安:1秒間に2cm

※熱く感じる場合は少し速めに動かしてください。

○電極ヘッド全体がお肌に触れるように使用してください。

○必ずお肌の上を動かしながら使用してください。一箇所にあて続けるとやけど・低温やけどの原因となります。

■CLEAN/MOISTURE/RF LEDモード

お肌の上をすべらすように、動かしながら使用してください。

■EMS UPモード

くるくると小さな円を描くように、お肌の上を動かしながら使用してください。

■COOLモード

スタンプを押すように「押しあて→離す→移動」を繰り返してください。

7. 使い終わったら


お手入れ・保管のしかた

- 1 電源をオフにする。
- 2 電極ヘッドの表面の汚れは、水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。
コットンリングは水洗いする。
・コットンリングは本体から外した状態で水洗いし、水分を拭き取ってください。
・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
・汚れなどが付着した状態で放置しないでください。
- 3 電極ヘッド・コットンリング以外の汚れは、乾いた布で拭き取る。



注意

電極ヘッド、コットンリング以外の部分は、防水仕様ではございません。
決して水に濡らさないでください。

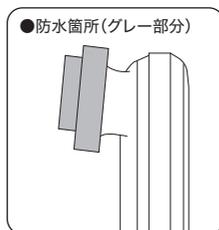

保管の仕方

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、USBケーブルを本体と電源から抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、よくある質問(Q&A)・トラブルシューティング(P12)をご確認ください。尚、こちらの対処方法で直らない場合は、使用を中止しUSBケーブルを本体から抜いてお買い上げ販売店または本書記載のカスタマーサポート窓口にご連絡ください。

8. よくある質問 (Q&A)・トラブルシューティング

	デリケートゾーンに使用する際の注意事項は？
Q1	粘膜の部分には使用しないでください。また、電気の刺激によって、かゆみや赤みが発生する場合があります。お肌に異常が発生したら、24時間は使用しないでください。症状が治らない場合は、医師にご相談ください。
	乾いたお肌に使っていいですか？
Q2	CLEANモードの時は水または精製水、MOISTURE/EMS UP/RF LEDモードの時は専用セラムをご使用ください。
	本体は防水仕様ですか？
Q3	電極ヘッドとコットンリング以外は、防水仕様ではございません。 決して水に濡らさないでください。
	使用時に強いピリピリ感があります。
Q4	刺激が強い場合はレベルを下げて心地よいと感じる強さまでご使用ください。 セラムは使用量を増やしてご使用ください。 ※それでも刺激が強すぎる場合は、そのモードのご使用をおやめください。
	海外でも使用できますか？
Q5	はい。ACアダプターが海外の電源環境に対応していれば、海外でもそのまま使用可能です。
	毎日充電しても大丈夫ですか？
Q6	はい、問題ございません。
	子供も使用できますか？
Q7	子供や身体の不自由な人だけで使用させないでください。未成年の方が使用する際には、保護者が取扱説明書を読み、正しい使い方や禁止事項を指導してトラブルのないようにご注意の上ご使用ください。

トラブルシューティング(故障かな?とおもったら)

1. 充電ケーブルが接続されたままではないですか？充電ケーブルは取り外してご使用ください。
2. バッテリーの充電は切れていませんか？適度に充電を実施してください。約3時間で満充電となり、約40分使用可能です。
3. 機器の仕様上、使用開始から一定時間経過すると自動的にスタンバイモードに切り替わります。(COOLモードはスタンバイにならず電源が切れます。)次のモードを使用の際はMODEボタンを押してください。

9. 製品仕様

定 格	DC 5V / 1A
消 費 電 力	約 10W
使 用 電 池	リチウムイオン蓄電池
充 電 時 間	約 3 時間 ※充電環境によって、充電時間は前後します。
使用可能時間	約 40分
外 形 寸 法	約 190x48x62mm
製 品 質 量	約 254g
材 質	【本体】ABS 【コットンリング】PC 【パネル】PC 【電極ヘッド】亜鉛合金
付 属 品	コットンリング / 充電用 USB ケーブル / 取扱説明書
防 水 仕 様	IPX4 相当 ※電極ヘッド部分
推奨環境温度	15～30℃
生 産 国	中国

※製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

10. 保証・アフターサービス

充電池について

- ・充電池は消耗品です。(保証対象外)
- ・充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は約300回が目安です)

廃棄について

- ・本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- ・本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

蓄電池の取り外し方はP14を参考に行ってください。



Li-ion

保証について


- ・通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします。(消耗品は除く)
- ・また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただいております。
- ・保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、保証規定の説明をよくお読みください。

廃棄時の蓄電池の取り外し方

- ①先の細いものなどを使って、フロントパネルを取り外します。
※強粘着テープで接着されています。




- ②フロントパネルの内側のネジを外します。

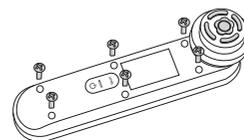

- ③ケースを外して、バッテリーのケーブルをコネクタから外します。

- ④カバーからバッテリーを取り外します。
※バッテリーは強粘着テープで接着されています。

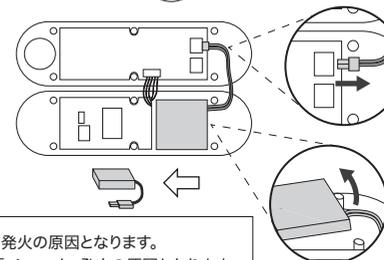

注意

- ・ケーブルは切らないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- ・蓄電池を傷つけないようにご注意ください。感電・ショート・発火の原因となります。
- ・図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
- ・お客様ご自身で分解した場合、故障の原因となりますのでご注意ください。

保証規定

Thaleia pitōn 家庭用テリケートゾーン美容機器 TLA-PH01IV (以下「本製品」) についての保証は、本保証書における条件に限定されるものとします。合同会社DMM.com (以下「弊社」) は、以下に定める通り本製品について通常の使用時において材質及び製造上の品質に関して適合しない目的物がないことを、最初のエンドユーザーである購入者が販売店から購入した日より1年間 (以下「保証期間」) 保証します。

但し、本保証は、以下のいかなる場合においても適用されません。

- ・本保証書がない場合
- ・本製品が購入者以外に譲渡された場合、および本製品が購入者により管理されていない場合
- ・本保証書にご購入日、お名前、ご購入代理店の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合
- ・ご購入後の輸送、移動、落下による故障及び損傷
- ・事故、乱用、誤使用、液体との接触、火事、地震または他の外的原因による損害
- ・機器の設置に起因する破損・損害
- ・消耗品についての損害、不具合
- ・特定の他社製品との相性問題
- ・弊社が定め、許可し、意図した使用方法以外で製品を使用したことにより生じる損害、動作不具合
- ・弊社以外の者が行ったサービス (修理・改造等を含む) によって生じる損害、動作不具合
- ・本製品を分解・改造された場合
- ・本製品が海外で利用されたことがある場合、および本製品が購入者により管理されていない場合

万一、製品の品質に関して適合しない目的物があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて弊社の判断により以下のいずれかを行うことができます。

- ・新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再生部品での修理
- ・新品の製品への交換
- ・性能および信頼性において新品と同等の再生製品への交換
- ・製品代金の返金

修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保証の残存期間が修理または交換日より90日間のいずれか長い期間とします。製品が交換された場合新しい製品がお客様の所有物となり、不具合製品または部品は弊社の所有物になるものとします。製品代金が返金される場合、返金対象製品は弊社に返却され弊社の所有物となるものとします。

法で最大限認められる範囲内において、ここに示した本保証及びその救済方法は唯一の保証であり口頭、書面、法定、明示または黙示を問わず、その他すべての保証、救済、条件について代わるものです。適用される法律によって認められる場合、弊社は特に一切の制定法上または黙示の保証をしないものとし、これには商品性、特定目的適合性、隠れたあるいは潜在的欠陥に対する黙示の保証をしないことを含むものですが、これに限るものではありません。弊社は製品の使用が中断されず利用いただける事を保証しません。また製品の使用に関する指示に従わないことに起因する損害に対して責任を負いません。

本保証書で認められることを除き法によって最大限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から生じるいかなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとします。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。